


ZITZI™ CARSEAT PRO






Zitzi Carseat Pro är speciellt utvecklad för personer med funktionsnedsättning med större behov av stöd och positionering när de reser med bil. Utöver många anpassningsmöjligheter som redan finns i produkten, kan även specialanpassningar utföras.

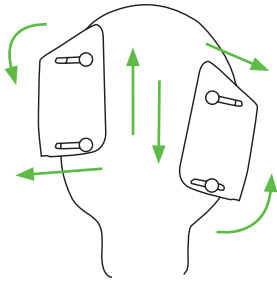


Justerbar rygg

Möjliggör trepunktsstöd för bättre postural kontroll vilket minskar risken för felställningar samt ökar möjligheterna för aktivitet. Vi har här möjlighet att både korrigera samt bibehålla positioneringen utefter de förutsättningar vi står inför.

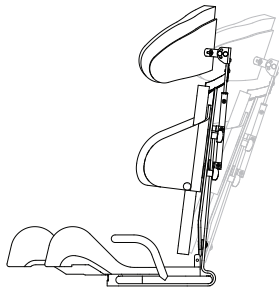

Följsam rygg


Ryggen vilar mot bilens ryggstöd vilket i sin tur ger ett aktivt sittande till viloläge i samma sits, då ryggen följer med ryggstödet i bilen.

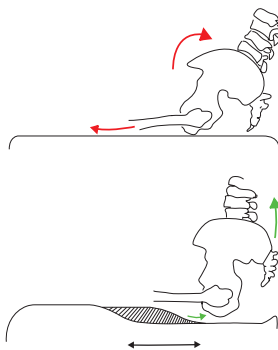

Integrerad sittgrop

En integrerad sittgrop underlättar för aktivitet, postural kontroll och minskar risken för skjuvning. Sittsystem med liten eller ingen sittgrop kan leda till bakåttippat eller roterat bäcken.

- Steg 1** justera bendelarna
- Steg 2** optimera sittgropen med sittgropsjusteraren

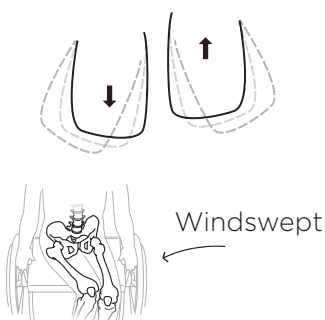

Justerbara bendelar

Man kan steglöst abducera eller adducera bendelarna. Möjlighet finns att justera sitsen 10 cm i sittdjup, för att uppnå en så optimal sittställning som möjligt och samtidigt låta brukaren växa med hjälpmedlet.

Bilden visar:
Carseat Pro storlek 2
med grått foder

Huvudstöd (standard)


Tre olika storlekar som enkelt justeras i både höjd och vinkel

Krocktestad och godkänd

Gällande EU-standarden ECE-R44.04

Justerbar rygg

Enkel att anpassa till önskad positionering samtidigt som brukaren sitter i stolen

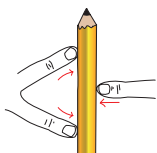

Foder

De grundligt brandtestade fodren är enkla att ta av och byta ut eller tvätta

Säkerhetsbåge

Ger bekväm bältesanvändning och håller bältet på rätt plats

Vridplatta

För att underlätta i- och urstigning



Carseat Pro

Bilstolen med stora anpassningsmöjligheter för barn och ungdomar med särskilda sittbehov. Allt för att uppnå en så optimal sittställning som möjligt och samtidigt tillåta brukaren att växa i samma stol.

Storlekar 2 st
Brukarlängd 90-160 cm
Axillhöjd 22-33 cm
Krocktestad Godkänd

Sittbredd 34 cm
Sittdjup 27-41 cm
Bålbredd 14-26 cm
Brukarvikt 15-36 kg



Färgskalor

För en enklare justering av sittdel (sittdjup)

Höjdjusterbar rygg

Ryggen kan enkelt justeras i höjd vilket tillåter brukaren att växa med stolen



Abduktion / Adduktion / Windswept

Enkel att optimera sittdelen efter användarens behov





Carseat Pro (grå)



Carseat Pro (röd)



Carseat Pro (blå)




Carseat Pro (Alcantara)




Huvdstöd (standard)



Huvdstöd (lång)

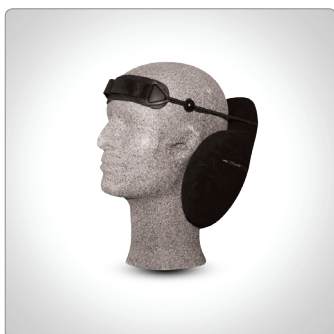

Pannband

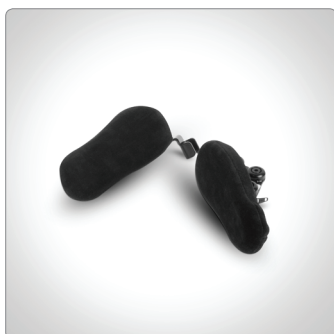

Bäckenstöd



Bord



Fotstöd



Sternumstöd Pro



H-Sele Pro



Antirotationsbälte



Vridplatta



Kil



Zitzi Carseat Pro är krocktestad på VTI Sverige och godkänd enligt EU-standarden ECE-R44.04. Den uppfyller högt ställda krav vid krocktest upp till 75 kg brukarvikt. Zitzi Carseat Pro är krockgodkänd monterad framåtvänd i åkriktningen i bilens ordinarie bilsäte och med bilens trepunktsbälte. Vid montering i specialanpassat fordon bör den som anpassat fordonet rådfrågas.